


MOJI  
MEDİKAL



ANKARA

# REVITRANE

Doğal ve Uzun Süreli  
Güzellik!

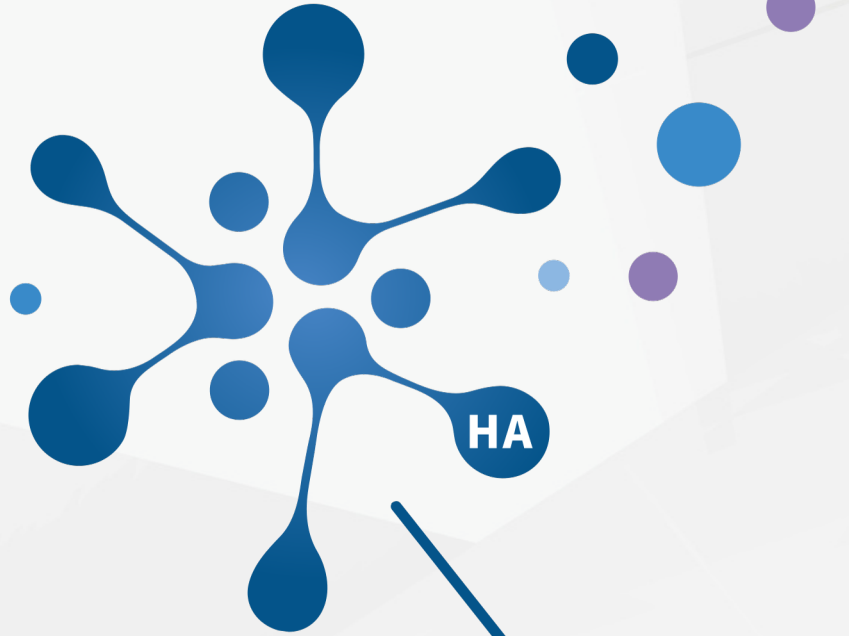

CE 2265

BR PHARM

ÜTS  
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

# Revitrane - HA Dolgunun Avantajları En Üst Seviyede

Minimum çapraz bağlayıcı (BDDE) içeren güvenli, tek aşamalı dolgu maddesi.

## REVITRANE™

Revitrane Tek Aşamalı Dolgu Serisi




### Classic

### Volume

### Premium

## Revitrane - HA Dolgunun Avantajları En Üst Seviyede

Minimum çapraz bağlayıcı (BDDE) içeren güvenli, tek aşamalı dolgu maddesi

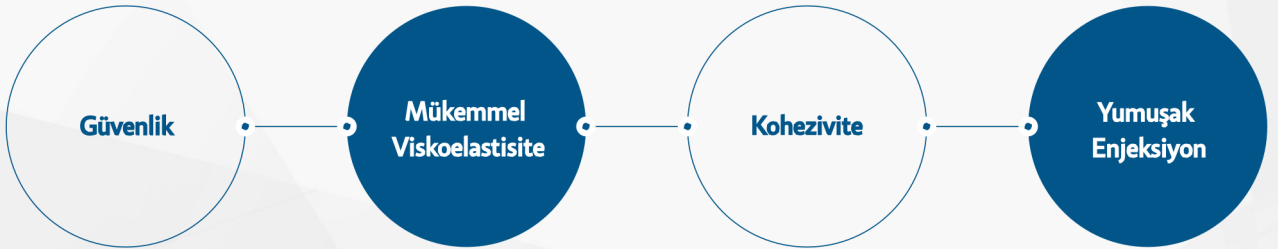


- ✓ Yüksek kalite hammadde
- ✓ BDDE kullanarak minimize edilmiş kimyasal çapraz bağ oranı
- ✓ Gelişmiş artık BDDE giderme işlemi
- ✓ Homojen çapraz bağlı HA yapısı
- ✓ Doğal hacim oluşturmak için yumuşak viskoelastik jel dokusu
- ✓ Başlangıç hacminin kohezif jel ile uzun süre korunması
- ✓ Çevresindeki cilt dokusuyla uyum sağlayan gelişmiş cilt entegrasyonu
- ✓ Pürüzsüz Pürüzsüz ve homojen enjeksiyon
- ✓ Diğer ürünlere kıyasla düşük ekstrüzyon kuvveti



### Onaylı hammadde

Revitrane; Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Kalite Ve Sağlık Hizmetleri Direktörlüğü (EDQM) onaylı, güvenli ve kaliteli hyalüronik asit kullanılarak üretilmiştir

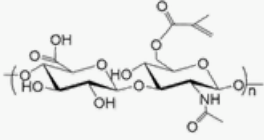

Hyalüronik Asit

### Güvenli Malzeme

- 10ppm'in altında ağır metal içeren, güvenli malzeme (FDA ve EDQM standartları 20ppm'dir)

|               | Avr.Farm.                | Revitrane     |
|---------------|--------------------------|---------------|
| Artık protein | En fazla %0,3 ya da %0,1 | En fazla %0,1 |
| Endotoksin    | <0,5 ya da 0,05IU/mg     | <0,04IU/mg    |

### Benzersiz HA Çapraz Bağ İşlemi

Düşük Kimyasallı ve Geliştirilmiş Çift Çapraz Bağlama Metodu  
LED Metodu

Uzun süreli & Düşük ısıyla çapraz bağ

HA deformasyonunu en aza indirir ve fiziksel çapraz bağlanma oranını artırır



Tamamlanmamış çapraz fragmanları (sarkan çapraz bağlayıcı) en aza indirilir; Uzun süreli ve düşük sıcaklıklı çapraz işlemi kullanılarak tam çapraz bağlama oranı artırılır.

# İleri Kalıntı Giderme Tekniği- ATER

## Clapraz Bağlı HA için Safılaştırma Teknolojisi

Minimum BDDE kullanımı

Çapraz bağlanma oranı ( MoD\* ) %5'in altında

| Faktör       | J Ürünü     | Revitrane |
|--------------|-------------|-----------|
| BDDE miktarı | 800~1000ppm | 500ppm    |

Artık BDDE'yi giderme teknolojisi

Benzersiz tekrarlı temizlik teknolojisiyle artık BDDE'nin tamamen giderilmesi

### HA Jelinin kuruması Sonrası Renk karşılaştırması

J-V Ürünü



BDDE Kalıntısı temizliğinin yetersizliğinden Sarı Renk

Revitrane Premium(Beyaz)




BDDE Kalıntısının tamamen temizlenmesi sonucu; HA hammaddesinin orijinal beyaz rengi

## Mükemmel Viskoelastite (G)

Revitrane; ideal viskoelastisite için çok ince HA partikülleri içeren, doğal hacim sağlayan, yumuşak, jel tipi bir dolgu maddesidir. Kolayca şekillendirilebilir ve yumuşak bir enjeksiyon hissi verir

| Ürün              | 0,1Hz      | 1,0Hz      |
|-------------------|------------|------------|
| J Ürünü           | 310~330 Pa | 350~400 Pa |
| Revitrane Premium | 328 Pa     | 383 Pa     |

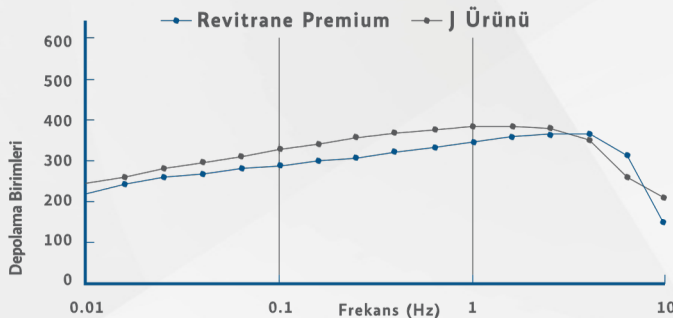


Revitrane Premium, J Ürüne Yakın bir Viskoelastisiteye Sahiptir

## Yüksek Kohezivite

Revitrane'in kohezif jel dokusu başlangıç şeklini korur ve basınç altında migrasyonu en aza indirir

Revitrane Premium ve diğer Kore ürünlerinin 6 saat sonrasındaki mürekkepdifüzyon testi sonucu

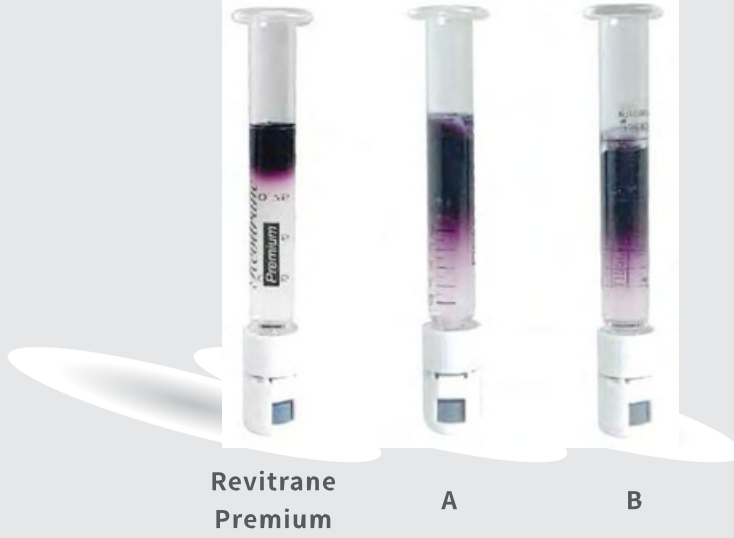


## Düşük ekstrüzyon kuvveti tedavi memnuniyetini artırır

Revitrane, homojen bir HA yapısı oluşturmak için, yüksek kaliteli HA malzemesi ve saflaştırma işlemi sayesinde düşük ve sabit ekstrüzyon kuvvetine sahiptir.

| Ürün              | Ekstrüzyon kuvveti (N) |
|-------------------|------------------------|
| J Ürünü           | 12~15                  |
| Revitrane Premium | 10~12                  |

Ekstrüzyon Kuvveti VS Mesafe

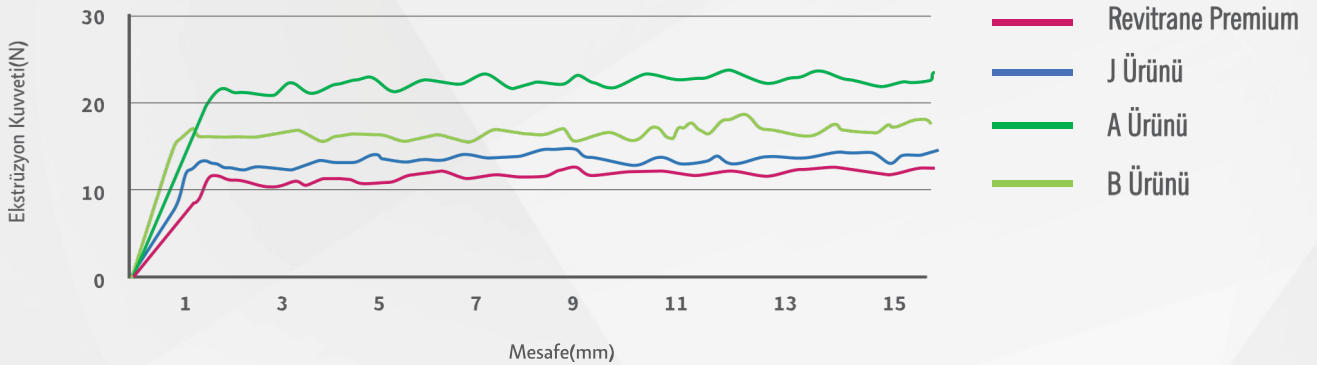

# REVITRANE™

## Revitrane HA20 Skin Booster

Çapraz bağlı jel; yumuşak ve düşük kohezif özelliği ile, biyorevitalizasyon ve nemlendirme etkisi sağlar. Skin Booster, düşük viskozite ve elastikiyete sahiptir; cildi nemlendirmek, cilt boyunca ince kırışıklıkları düzeltmek ve elastikiyeti artırmak için uygundur.

## REVITRANE™ HA20 Skin Booster



## Revitrane Çift Aşamalı Serisi

Revitrane Premium-Q ve Premium SUB-Q; güçlü elastik partikül tipi dolgu maddeleridir, bu sayede görünümü ve konturu iyileştirmek için uygunlardır. Yanak, çene ve burun şeklinin yapısını korumak için iyi bir destek sağlarlar.

## REVITRANE™ PREMIUM-Q



## REVITRANE™ PREMIUM SUB-Q



# Uygulama Alanı

Revitrane HA20 Skinbooster

Revitrane Premium-Q


Revitrane Premium

Revitrane Premium SUB-Q

Revitrane Volume

Revitrane Classic

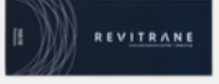

| Ürün                                                                                                    | Ambalaj Birimi                      | HA Konsantrasyonu | Jel Tipi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uygulama Alanları                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HA20 Skinbooster | 2.0mL x 3syr                        | 20mg/mL           | Viscosity <br>Elasticity <br>Cohesivity  | Derin kırışıklıklar-<br>Biyorevitalizasyon-Tüm yüz<br>nemlendirme-El sırtı-Boyun<br>kırışıklıkları |
| <br>Classic          | 1.0mL x 1syr<br>30G x ½"(13mm) 2 ea | 20mg/mL           | Viscosity <br>Elasticity <br>Cohesivity  | Göz altı, İnce<br>kırışıklıklar,<br>Galabella                                                      |
| <br>Volume           | 1.0mL x 1syr<br>27G x ½"(13mm) 2 ea | 20mg/mL           | Viscosity <br>Elasticity <br>Cohesivity  | Dudak, Nazolabial,<br>Malar,<br>Frontal, Yüzeysel<br>temporal                                      |
| <br>Premium          | 1.0mL x 1syr<br>27G x ½"(13mm) 2 ea | 20mg/mL           | Viscosity <br>Elasticity <br>Cohesivity  | Yanak, Nazolabial çizgiler,<br>Yüz konturu, Zigoma,<br>Russian lips                                |
| <br>Premium Q        | 1.0mL x 1syr<br>25G x ½"(13mm) 2 ea | 20mg/ml           | Viscosity <br>Elasticity <br>Particle    | Burun ucu, Burun<br>Kemer<br>Özel burun dolgusu                                                    |
| <br>Premium SUB-Q    | 1.0mL x 1syr<br>25G x ½"(13mm) 2 ea | 20mg/ml           | Viscosity <br>Elasticity <br>Particle    | Jawline, Çene, Zigoma                                                                              |

# MOJI MEDİKAL



ANKARA



Üretici Firma : BR Pharm

İthalatçı Firma : Moji Medikal

[www.mojimedikal.com](http://www.mojimedikal.com)

@mojimedikal

+90 (537) 482 46 92

+90 (312) 310 65 49

Mutlukent Mah. 2010 Cad. No: 23  
Çankaya, Ankara / TÜRKİYE



08809360971508

MADE IN KOREA



MOJI  
MEDİKAL



BR PHARM